

Concentrateur d'oxygène portable

iGo[®]2



*Avec vous,
partout*



- Performant
- Flexible et intelligent
- Léger et discret

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss[®]
HEALTHCARE



Concentrateur d'oxygène portable

- ✔ **Petit et léger** – Poids à partir de 2,25 kg.
- ✔ **Endurant** – Fonctionne sur batteries rechargeables jusqu'à 3,5 heures d'autonomie sur un réglage 2 pour 20 RPM.
- ✔ **Performant** – Peut délivrer jusqu'à 1100 ml/min d'oxygène en continu.
- ✔ **Efficace** – Haute sensibilité (0.05CmH₂O) qui permet un déclenchement rapide pour une grande réactivité.
- ✔ **Discret** – Doté d'un niveau sonore très faible de 37,5 dBa (réglage 2) et d'un design ergonomique pour des déplacements en toute sérénité.
- ✔ **Accessible** – Batterie amovible et écran HD haute définition accessible par le dessus de l'appareil, depuis le sac de transport.

Fonctions additionnelles

SmartDose™


■ L'iGo2 est équipé de la fonction **SmartDose™**. Cette fonction permet de prévenir une éventuelle désaturation lors d'un effort du patient. Lorsque cette fonction est activée, l'iGo2 analyse la fréquence respiratoire du patient sur différentes échelles de temps. Il établit une fréquence respiratoire « normale » et peut ainsi détecter quand un patient fait un effort. Quand l'algorithme de l'iGo2 identifie un effort du patient, le volume par minute passe automatiquement au réglage supérieur. Le volume par minute retourne à son réglage d'origine quand la phase d'effort est terminée.

AutoBreath™

■ S'il n'y a pas de détections d'inspirations, l'iGo2 basculera sur le mode **AutoBreath™** en conservant la même consigne de réglage. Ce mode permet de déclencher automatiquement des bolus. L'AutoBreath™ garantit la distribution d'oxygène au patient si la fréquence respiratoire est inférieure à 4 inspirations par minute.

PulseDose™

■ Grâce à la fonctionnalité **PulseDose™**, l'iGo2 ajuste automatiquement les bolus pour garantir un volume d'O₂ fixe par minute.

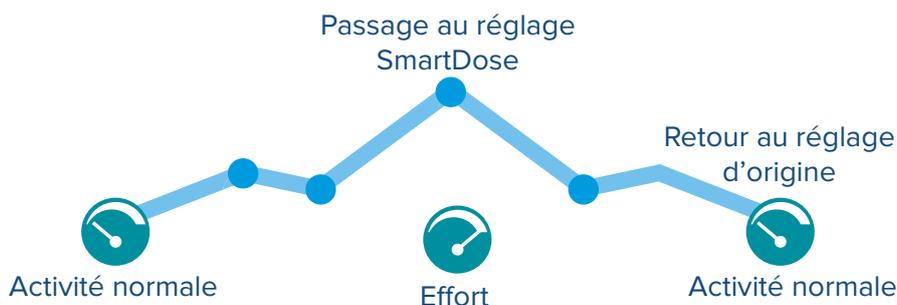



Retrait facile de la **batterie**.
La batterie iGo2 peut être facilement remplacée sans retirer l'unité du sac de transport.



Remplacement du filtre Antibactérien* sans outil dédié (clé plate de 8mm).



* Réf. 125D-642 (par 100)

Codes LPP

Codes	Designations
1125181	Oxygénothérapie à long terme, déambulation, DRIVE DEVILBISS, IGO2, OLT 2.33
1113670	FRA-434, Ventilation assistée, trachéotomisés + OLT 2.33 DRIVE DEVILBISS, IGO2
1138321	FRA-435, Ventilation assist, >ou= 12 heures + OLT 2.33 DRIVE DEVILBISS, IGO2
1194800	FRA-436, ventilation assistée, <12 heures + OLT 2.33 DRIVE DEVILBISS, IGO2
1131879	FRA-437, hyperinsuffla ou in-exsufflations + OLT 2.33 DRIVE DEVILBISS, IGO2
1126430	FRA-438, trachéotomie sans ventilation + OLT 2.33 DRIVE DEVILBISS, IGO2
1141286	FRA-439, PPC apnée sommeil, 9.PE1 + OLT 2.33 DRIVE DEVILBISS, IGO2
1136664	FRA-440, PPC apnée sommeil, 9.PE2 + OLT 2.33 DRIVE DEVILBISS, IGO2

Les accessoires



Câble d'alimentation
Réf. : DV51D-607



Cordon allume-cigare
Réf. : 125D-670



Batterie rechargeable
Réf. : 125D-613



iGo2 Station de chargement (Batteries non incluses)
Réf. : 125CH-614



Sac de transport
Réf. : 125D-670



Sac à dos
Réf. : 125D-674

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

iGo[®]2

Référence (avec batterie)	125K - iGo2 une batterie ; 125K-XB - iGo2 deux batteries	
Dimensions (h x l x p)	21,3 x 8,9 x 21,8 cm	
Autonomie	3,5 heures (réglage 2 pour 20 rpm)	
Temps de charge	Inférieur à 3 heures	
Poids avec batterie	2,25± 0,05 kg (avec batterie)	
Volume d'oxygène max	1100 ml/min en mode SmartDose™	
Pureté de l'oxygène	90 % ± 4/-3 %	
Température d'utilisation	de 5°C à 35°C	
Humidité d'utilisation (sans condensation)	15 à 93%	
Altitude max	0 - 3050 m	
Volume calculé	260 ml/min en réglage 1 725 ml/min en réglage 3 1014 ml/min en réglage 5	440 ml/min en réglage 2 880 ml/min en réglage 4 1100 ml/min en réglage 5SD
Fréquence respiratoire max	40 bpm	
Niveau sonore	37,5dBA (sur le réglage 2)	
Fonctions additionnelles	AutoBreath™, SmartDose™	
Garantie	3 ans pour le dispositif, 1 an pour batterie et tamis	

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

CE 0044

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495
www.drivedevilbiss.fr

