FLOWTENS

LEAD THE FLOW

Neurostimulation Tibiale Postérieure Transcutanée



Mise en place de FLOWTENS

Flowtens s'utilise au choix :
· soit avec la **chevillère**
· soit le **patch**

Flowtens avec la chevillère




Clipsez
le stimulateur
sur la face
extérieure




Clipsez
les électrodes
à l'intérieur puis
retirez le film




Vérifiez la
chevillère
R : Pied droit
L : Pied Gauche

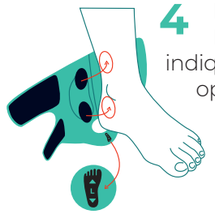

Positionnez le pied.
Les zones en rouge
indiquent le positionnement
optimal des électrodes
lors de la fermeture
de la chevillère

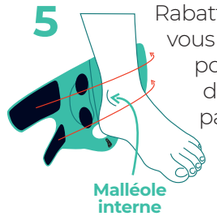

Rabattez les scratchs en
vous assurant du bon
positionnement
des électrodes
par rapport à la
malléole
interne

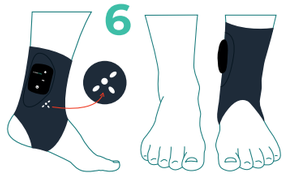


Cet indicateur doit se trouver
sur votre malléole interne

Flowtens avec le patch



Clipsez le stimulateur
sur la face exterieure

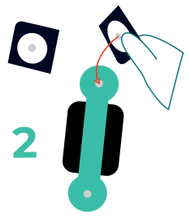

Clipsez les électrodes
puis retirez le film
de protection



Positionnez le patch en arrière et en dessous
de la malléole interne (le positionnement
peut se faire sur votre jambe droite
ou gauche selon votre choix)

Application smartphone

Personnalisable
& programmable

Digitale
& connectée

Simple
& ergonomique



DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

Références






Flowtens chevillère droite



Flowtens chevillère gauche

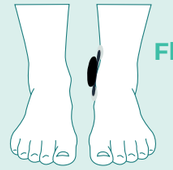

Flowtens patch

	Dénomination	Réf	GTIN
	**Stimulateur*** (livré avec une boite de transport et un câble de recharge)	FLO-02-201	3770025687049
	**Chevillère droite x1**	FLO-02-108-R	3770025687025
	**Chevillère gauche x1**	FLO-02-108-L	3770025687032
	**Patch x1**	FLO-02-109	3770025687094
	**Electrodes auto-adhérentes****	· SAE-SC040000 WP-VT · SAE-SC050050 WP-VT	UDI (01)04719872332183 (11)YYMMDD (10)YYWW
	**Boite de transport**	FLO-07-103	3770025687100
	**Câble de recharge**	FLO-05-101	3770025687056

***Code 1111701** - LOCATION HEBDOMADAIRE
Code 6163358 - ACHAT d'un dispositif Flowtens
****Code 6154951**

Programmes disponibles

Programme 1

20	10	200
min	Hz	µs

Programme 2

20	14	210
min	Hz	µs

Programme 3

20	20	200
min	Hz	µs

Programme 4

20	25	210
min	Hz	µs

Programme 5

20	5	210
min	Hz	µs

Programme libre

0 à 120	0 à 50	0 à 600
min	Hz	µs

(code d'accès : 1234)

Caractéristiques techniques

Courant de sortie (ajustable) :
0 à 50mA* (+/-5% de la valeur max)
* Sur résistance 1000 Ohm (+/-10%)

Largeur d'impulsion (ajustable) :
50 à 600µs (+/-10%)

Fréquence d'impulsion (ajustable) :
1 à 50Hz (+/-10%)

Durée du programme (ajustable) :
1 à 120min


Consommation en fonctionnement :
< 0.1W

Alimentation :
Batterie rechargeable
Lithium-ion Polymer 3.7V

Caractéristiques RF :
· Bluetooth® LE : 2400-2483.5 MHz (ISM)
· Modulation : GFSK
· Puissance émission : -4.7 dBm
· Espacement et nombre de canaux :
1 MHz, 40 canaux
· Type d'antenne :
Céramique gain 0.5 dBi

Dimensions :
60 mm x 44 mm x 18 mm

Masse :
30g

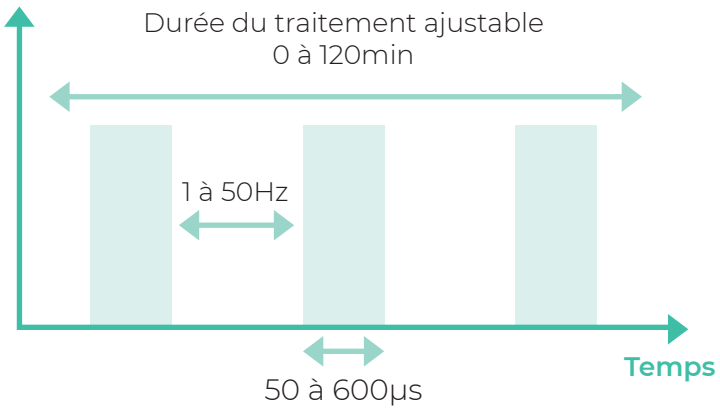

Service client :
· Pour passer commande : order@flowtens.com
· Pour toute question ou réclamation : contact@flowtens.com
Tél : 09 78 45 27 74

www.flowtens.com
Conçu, fabriqué et distribué par FlowStim Technology, France
Pôle Economique - 1010 Av de l'Europe 33260 La Teste de Buch

FlowStim TECHNOLOGY

Version DJ-016-MKT-V001
Mise en page : Laure Pécault